

ANALIZA BIAŁEK



100003549

Laboratorium Analizy

Klient: NIE WSKAZANO
Numer zamówienia: 100003549
Nazwa: EMPEROR TESTOSTERONE PROPIONATE
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: -----
Data przyjęcia: 2023-04-26
Data rozpoczęcia: 2023-05-10
Data zakończenia: 2023-05-10

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
Testosterone Propionate	Próbka dostarczona przez klienta	Przezroczysty płyn w szklanej fiolce


Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
Testosterone Propionate	EMPEROR TESTOSTERONE PROPIONATE 100MG/ML	117,68mg/ml	-----

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 117,68mg/ml. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 1mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki

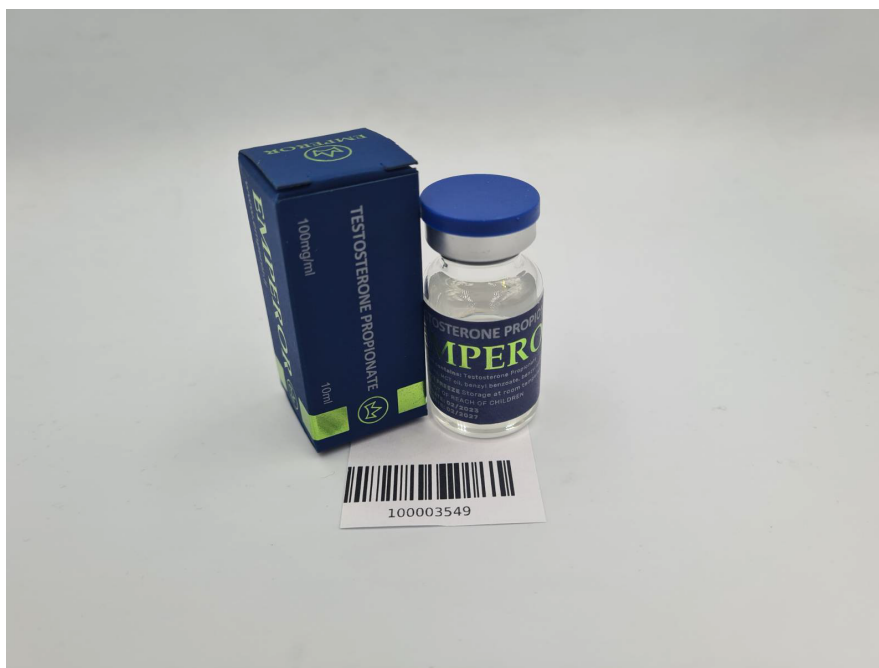

Hasło dostępu

NRG43GFS


Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając



Chromatogram

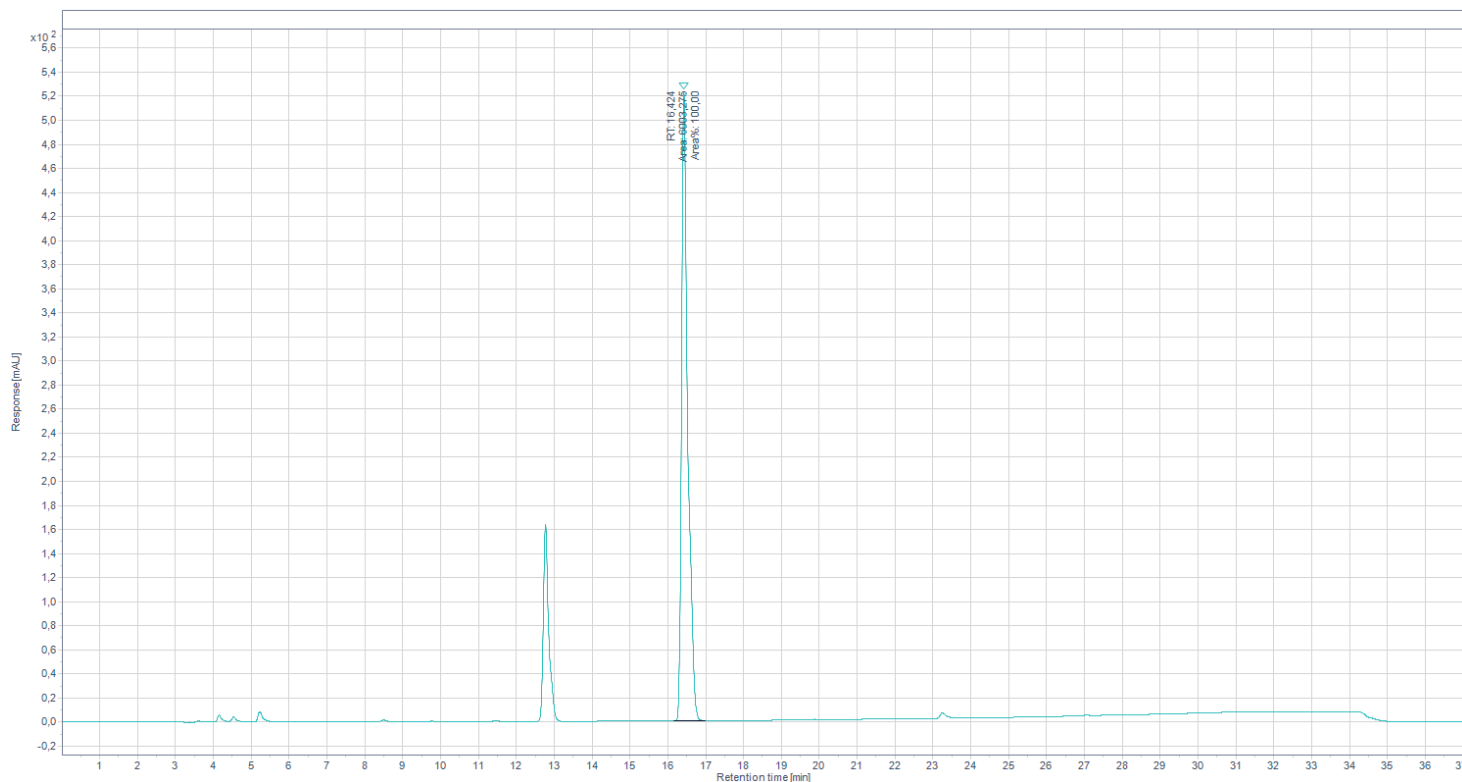

Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	60%	40%
2min	60%	40%
27min	5%	95%
30min	5%	95%

Hasło dostępu

NRG43GFS